

Tilknyt anæstesimonitor og respirator til ITA patient

Tilknyt anæstesimonitor og -respirator til ITA patient.....2

Dokumenttype: <i>Manual</i>	Fagområde/Emne: <i>COVID-19</i>	Gældende fra: <i>16.03.2020</i>	Godkendt af ERS: <i>dd.mm.åååå/ikke relevant</i>
Udgiver: <i>SP Anvendelse/CIMT</i>	Oprettet: <i>16.03.2020</i>	Version: <i>1</i>	Sidst ændret: <i>dd.mm.åååå</i>
<p>Ændring ift. sidste version: <i>I forbindelse med din oplæring til at indgå i Region Sjællands beredskab omkring COVID-19 er du omfattet af tavshedspligt. Du vil blive præsenteret for materiale, der kan indeholde fortrolige og personfølsomme oplysninger, som udelukkende må anvendes i en arbejdsammenhæng.</i></p>			

© 2014 Epic Systems Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Visse oplysninger heri er fortrolige og skal behandles i overensstemmelse hermed. After Visit Summary, Analyst, ASAP, Beaker, BedTime, Break-the-Glass, Breeze, Cadence, Canto, Care Elsewhere, Care Everywhere, Charge Router, Chronicles, Clarity, Cogito ergo sum, Cohort, Colleague, Comfort, Community Connect, Country Connect, Cupid, Epic, EpicCare, EpicCare Link, Epicenter, Epic Earth, EpicLink, EpicOnHand, EpicWeb, Haiku, Healthy Planet, Hyperspace, Identity, IntraConnect, Kaleidoscope, Light Mode, Lucy, MyChart, MyEpic, OpTime, OutReach, Patients Like Mine, Phoenix, Powered by Epic, Prelude, Radar, RedAlert, Region Connect, Resolute, Revenue Guardian, Rover, SmartForms, Sonnet, Stork, Tapestry, Trove, Trusted Partners, Welcome, Willow, Wisdom, With the Patient at Heart og World Connect er registrerede varemærker, varemærker eller servicemærker tilhørende Epic Systems Corporation i USA og/eller andre lande. Andre produkt- eller firmanavne, der henvises til i nærværende dokument, kan være varemærker, der tilhører deres respektive ejere. Amerikanske og internationale patenter er udstedt og afventer behandling.

Denne vejledning er baseret på Epic 2018.

Tilknyt anæstesimonitor og -respirator til ITA patient


Det er i SP muligt at tilknytte monitor og respirator fra et anæstesi bord til en patient på ITA. Det gøres som ved tilknytning af ethvert andet "non-fixed" (ikke tilknyttede sengepladsen) apparat:

Indtast et apparatnavn (1), eller klik "+ Tilføj" (2) og vælg apparat fra listen. Ved at klikke "Søgekriterier" (3) kan man vælge at søge blandt egen afdelings apparater, eller blandt alle apparater:

Type	Tilknyttet
PHILIPS MONITOR	22-11-18 17:07

CIMT vil på baggrund af de indmeldinger vi får fra afdelinger og medicoteknikere sørge for, at relevante anæstesiapparater er at finde blandt egen afdelings apparater.

OBS: Vær omhyggelig med at tilknytte det rigtige apparat til patienten. Hvis du kommer til at vælge et forkert apparat, der allerede er tilknyttet en anden patient, vil du blive mødt af en advarsel:

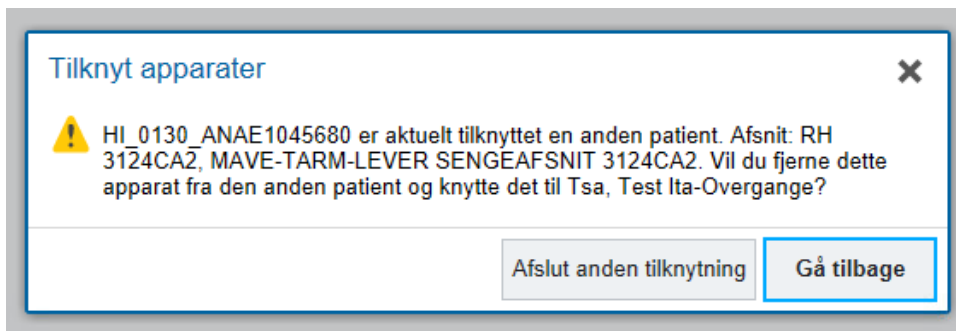

Hvis du tilsidesætter denne advarsel og klikker "Afslut anden tilknytning", vil apparatet begynde at sende data til den "nye" patient.

Anæstesirespiratorer kan levere følgende data til patientens vurderingsskema. Øvrige må dokumenteres manuelt:

- Inspirationstryk – indstillet
- PS niveau – indstillet
- TV – indstillet
- I:E ratio – indstillet
- RF – indstillet
- PEEP – indstillet
- Flowtrigger følsomhed – indstillet

- Dynamisk compliance – aflæst
- Plateautryk – aflæst
- PEEP – aflæst
- Peaktryk – aflæst
- Inspiratorisk TV – aflæst
- MV – aflæst

Når anæstesibordet flyttes tilbage på operationsstuen, fungerer det som det plejer.